



CRYO XC™

CRYO XC™ PLUS
CRYO XC™



CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™ PŘEDSTAVENÍ

CRYO XC™ je technologicky vyspělá kryosauna navržená pro **efektivní, bezpečnou a pohodlnou aplikaci celotělové kryoterapie.**

CRYO XC™ je vybaven nejnovějšími funkcemi pro bezpečné a ergonomické každodenní používání, jako jsou **dvojitě dveře, výtah, obrazovka s informacemi o proceduře, dotykový ovládací panel a nejnovější bezpečnostní sada.**

Její kompaktní rozměry, moderní design, účinnost a vynikající zážitek z kryoterapie z ní dělají ideální volbu pro firmy, kluby i jednotlivce.

CRYO XC™ je dokonalým doplňkem **fyzioterapeutických klinik, fitness center, sportovních klubů, lázní, kosmetických klinik, jakož i soukromých rezidencí.**



PŘEDSTAVENÍ

CELOTELOVÁ KRYOTERAPIE

Celotělová kryoterapie je tříminutová procedura která vystavuje tělo extrémním teplotám až **do -140 °C**, k podpoře rychlé regenerace, zvýšení výkonnosti, sníží únavy, podporu přirozené krásy a zlepšení celkové pohody.

Každá procedura obvykle **trvá 2 až 3 minuty** a poskytuje uživatelům **osvěžující a revitalizující zážitek s výhodami, které přesahují možnosti tradičních metod založených na chladu**, jako je ponoření do vody nebo terapie ledem.



FYZIOTERAPIE

- Management bolesti
- Redukce otoku
- Management zánětu
- Zlepšení cirkulace
- Rychlejší zotavení



SPORT

- Zvýšení výkonu
- Zkrácení času zotavení
- Management bolesti
- Management zánětu



ESTETIKA

- Redukce celulitidy
- Zvýšení produkce kolagenu
- Zlepšení textury pokožky
- Rychlejší zotavení po kosmetických procedurách



WELLBEING

- Zlepšená kvalita spánku
- Zvýšená hladina energie
- Posílení mladistvého vzhledu

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Individualizace

Dostupnost ve 25 různých barevných kombinacích

Dotykový displej operátora

Dotyková obrazovka orientovaná na operátora umožňuje snadnou správu procedury

Špičkové bezpečnostní prvky

Až 10 pokročilých bezpečnostních funkcí pro bezpečný provoz za všech okolností



Obrazovka s informacemi o proceduře

Informační obrazovka na straně uživatele zobrazující zbývající čas procedury a aktuální teplotu.

Režim tepelného kontrastu

Jedinečná možnost Teplé/Kryo kombinované procedury pro vylepšení kryo efektů

Špičková kvalita

Komponenty vysoké kvality v kombinaci se spolehlivým provozem a vyváženým zážitkem z kryoterapie.

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™

VLASTNOSTI



VLASTNOSTI

CRYO XC™

CRYO XC™ PLUS

21,5" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA - OVLÁDACÍ PANEL	✓	✓
15" MULTIMEDIÁLNÍ/INFO OBRAZOVKA	✓	✓
TERMOKONTRASTNÍ KRYOTERAPIE	✓	✓
PŘÍZPŮSOBITELNÁ ORIENTACE	✓	✓
VÝTAH	✓	✓
DIFUZORY	✓	✓
AKTIVNÍ SYSTÉM SUŠENÍ	✓	✓
ZÁZNAMNÍK PROCEDUR	✓	✓
DÁLKOVÁ DIAGNOSTIKA	✓	✓
BEZPEČNOSTNÍ VENTIL	✓	✓
VÝFUKOVÝ VENTILÁTOR	✓	✓
MONITOROVÁNÍ HLADINY KYSLÍKU	x	✓
DVEŘOVÝ SENZOR	x	✓
SLEDOVÁNÍ VLHKOSTI	x	✓
SLEDOVÁNÍ TLAKU	x	✓
TLAČÍTKO NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ PROCEDURY	x	✓

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™ SYSTÉMY



TLAKOVÝ SYSTÉM



BEZTLAKOVÝ SYSTÉM

POPIS	Tlakový systém CRYO XC™ využívá tlakové nádoby pro skladování a zásobování tekutým dusíkem.	Beztlakový systém CRYO XC™ využívá ke skladování a zásobování tekutým dusíkem beztlakové nádoby nebo Dewarovy nádoby.
DOSTUPNOST	CRYO XC™ PLUS CRYO XC™	CRYO XC™ PLUS CRYO XC™
CHLADICÍ MÉDIUM	Tlakový systém je chlazen kapalným dusíkem	Beztlakový systém je chlazen kapalným dusíkem
SKLADOVÁNÍ DUSÍKU	Objem: 70 L až 1000 L Optimální tlak 1,5 -2,5 Bar 22-37 PSI *Tlakové nádoby a přípojky nejsou součástí dodávky	Kapacita: 50L *Dvě Dewarovy nádoby jsou součástí beztlakového systému.
SPOTŘEBA DUSÍKU	Kapalný dusík: 5 l až 8 l	Kapalný dusík: 4 l až 7 l
VHODNÉ PRO	Vysoká kapacita a návštěvnost. Wellness/Recovery centra, sportovní organizace, fitness centra, tréninková zařízení, rehabilitační zařízení, zdravotnická zařízení/kliniky	Cryo Startupy, wellness/regenerační centra, lázně, sportovní organizace, fitness centra, tréninková zařízení, kosmetická centra, domácí a soukromé použití, exkluzivní společenské kluby

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™

INSTALACE

TLAKOVÝ SYSTÉM



BEZTLAKÝ SYSTÉM



Požadavky na instalaci pro oba systémy

Prostor

Minimum:	Doporučeno:	Výška stropu:
20m ²	25m ²	230 cm

Orientace jednotky

To může být důležitý faktor pro místnosti s omezeným prostorem. CRYO XC™ nabízí flexibilní levou/pravou orientaci jednotky.

Elektrické specifikace

Max: 4000W · Při nečinnosti: 140W · Relace: 1000W · Sušení: 3400W
208 až 240V | 50 Hz - 60 Hz | Doporučuje se 24A jistič.
Vybaveno evropskou kontinentální zástrčkou - Může vyžadovat změnu
vyhrazeného elektrického obvodu (doporučeno).

Ventilace

Vyžaduje se minimálně šest výměn vzduchu za hodinu.

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™


SPECIFIKACE

TEPLOTA PROCEDURY	Rozsah teplot procedury – doporučeno Rozsah teplot procedury – rozšířený	(-110 °C až -140 °C) (-110 °C až -160 °C)
SKLADOVACÍ NÁDOBY	Tlakový systém Beztlakový systém	Nádoby nejsou součástí dodávky Včetně 2x 50litrové nádoby
SPOTŘEBA	Tlakový systém Beztlakový systém Elektřina	5 - 8 litrů (LN2) 4 - 7 litrů (LN2) Procedura: Až 500 W Sušení: Až 3000 W
ELEKTRICKÉ SPECIFIKACE	Výstupní napětí Frekvence Ampery	230V 50 Hz Min. 16 A
CERTIFIKACE	Značka CE FDA 513 g Nemedicínské zařízení (Klasifikace)	✓ ✓
POŽADAVKY NA INSTALACI	Plocha Větrání Tekutý dusík	Min. 9 m2 / 97 stop2 Optimální 15 m2 / 160 ft2 Aktivní ventilace / AC Pravidelné zásobování



Výška
2200 mm

Šířka
950 mm

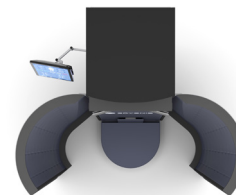

Hloubka
1500 mm

Rozpětí
1500 mm

Hmotnost: 340 - 360 kg



RECOVERY FOR EVERYONE

Kontaktuj nás
info@cryoniq.com

Navštívte nás
www.cryoniq.com

